



MANUEL DE L'UTILISATEUR

FR

Embout pour aides auditives de type BTE

NU-0100-001_2_FR-RevC

MICROSON S.A.U.
Can Cuías, 69
08110 Montcada i Reixac, Spain
Tel. +34 93 300 58 00
www.microson.es



ID du document: DS-0100-001-EN (embout contour d'oreille).

5 Description des symboles



Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les informations contenues dans le mode d'emploi, telles que les avertissements et les précautions



Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.



Indique la date à laquelle le produit a été fabriqué.
Indique que le produit a été fabriqué en Espagne.



Indique les limites de température à l'intérieur desquelles le produit peut être exposé en toute sécurité.



Indique le numéro de catalogue du fabricant.



Indique le numéro de série.



Fabricant du produit.

1 Dispositifs médicaux

Nom de l'appareil: Embout

2 Votre Microson embout auriculaire

Vous avez acheté un embout Microson à connecter à n'importe quelle marque et modèle d'aide auditive de type BTE, nous tenons donc tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez et à notre produit.

L'embout est façonné et formé par MICROSON pour s'adapter à votre oreille. Cela signifie que l'embout ne peut être utilisé que par vous et non par d'autres.

Nous espérons que ce produit sera à votre entière satisfaction et répondra à toutes vos attentes.

L'équipe Microson vous remercie de votre confiance et vous souhaite beaucoup de succès dans votre essai.

Vous disposez d'une déclaration du produit conforme à la norme applicable, qui peut être sollicitée à tout moment par l'intermédiaire du téléphone de contact qui apparaît dans le manuel.

3 Description de votre embout auriculaire



Le canal de l'embout ne permet pas le passage complet du diamètre du tube, celui-ci est remplacé à l'aide d'un crochet et d'une partie du tube.

4 Fabricant

Ce manuel s'applique aux embouts Microson destinés à être utilisés avec un contour d'oreille.



MICROSON S.A.U.
Can Cuías, 69
08110 Montcada i Reixac,
Spain

Il est important que vous lisiez et suiviez les instructions de ce manuel pour l'utilisation et l'entretien appropriés de l'appareil, ainsi que pour éviter les blessures ou les dommages.

Les spécifications techniques peuvent être téléchargées sur le site Web <https://microsoncs.gaes.es/webMicrosondownloads/>

6 Utilisation prévue


L'embout auriculaire est un dispositif sur mesure qui s'insère dans l'orifice naturel du conduit auditif du patient. Associé à un appareil auditif, il compense la perte auditive. MICROSON le moule entièrement à la demande, en l'adaptant aux caractéristiques spécifiques du conduit auditif du patient.

Réutilisable, il ne nécessite aucun réglage préalable. Il est conçu pour les adultes et les enfants.

Ce dispositif n'est pas destiné aux personnes présentant une déficience intellectuelle en raison du risque élevé de mauvaise utilisation. Il s'agit d'un dispositif non produit en série, fabriqué sur prescription d'un professionnel de santé qualifié, et destiné exclusivement à un patient spécifique pour répondre à ses besoins et à sa pathologie.

7 Principe de fonctionnement

Les embouts sont chargés de conduire le son et de permettre l'adaptation de l'appareil à l'oreille du patient. L'appareil est compatible avec les aides auditives contours d'oreille.

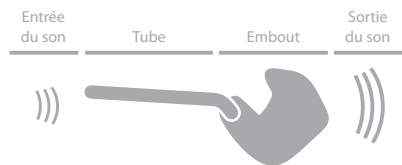

L'appareil auditif RIC est un type d'appareil auditif qui peut être partiellement adapté à l'EEC (conduit auditif externe). C'est comme un appareil auditif contour d'oreille, mais dans ce cas, le récepteur va à l'intérieur de l'ECC, installé via un embout auriculaire.

8 Consignes de sécurité

- L'empreinte du conduit auditif doit être effectuée par un audioprothésiste.
- La prescription des appareils auditifs doit être effectuée par un audioprothésiste.
- Pour une utilisation par les enfants, manipulez et utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte.

- Si vous avez des doutes ou des problèmes (par exemple, l'ajustement ou le retrait de l'embout), veuillez consulter votre audioprothésiste.
- S'il reste une partie de l'oreille, seul un professionnel de la santé peut l'enlever.
- Protégez vos embouts de l'humidité et des sources de chaleur.
- N'utilisez pas vos embouts pour prendre une douche, un bain ou vaporiser vos cheveux.
- Évitez les coups violents sur les embouts.
- N'utilisez jamais de micro-ondes ou d'autres appareils émettant de la chaleur pour sécher l'embout.
- N'utilisez pas d'eau, de solvants ou d'huile pour nettoyer votre embout.
- Ne pas ingérer ou déformer.
- En aucun cas, ne modifiez ou ne tentez de réparer l'appareil (par exemple, si une pièce se détache), cela annulera la garantie du produit et Microson ne sera plus responsable de la sécurité, de la fiabilité et des performances du produit.
- En cas de réaction allergique ou d'irritabilité, n'utilisez pas l'appareil et consultez votre centre auditif.
- Pour plus d'informations sur votre aide auditive et vos accessoires, veuillez vous référer au manuel de votre aide auditive.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, consultez un audioprothésiste.
- Les limites de température dans lesquelles le produit peut être exposé sont comprises entre -20°C et 60°C.
- La température maximale de fonctionnement (avec l'appareil auditif) est de 40°C.
- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une peau blessée, mais uniquement avec une peau intacte.
- L'embout de la prothèse transmet le son généré dans l'aide auditive. Ainsi, tout excès de pression acoustique passera directement de l'embout de la prothèse auditive au tympan de l'utilisateur.

9 Effets secondaires

Le produit est en silicone ou en acrylate et peut contenir du nylon s'il dispose d'un extracteur de fil. En cas de réaction allergique/irritabilité, n'utilisez pas l'appareil et consultez votre centre auditif.

10 Contre-indications

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap mental, en raison du risque élevé d'utilisation abusive de l'appareil.


11 Comment utiliser votre L'embout

11.1 Connexion de l'épaulard avec votre aide auditive BTE

1. Assurez-vous de fixer le moule et l'aide auditive du bon côté.

Droite = embout en rouge point.
Gauche = embout en bleu pois.
2. Connectez le tube de l'embout avec votre aide auditive BTE.

11.2 Placer l'embout dans votre oreille

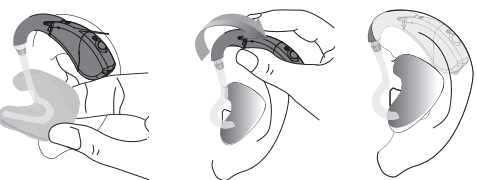

1. Insérez soigneusement votre embout dans le conduit auditif.
2. Placez l'aide auditive derrière l'oreille.
3. Vérifiez que l'appareil est correctement pris en charge.

11.3 Retirez l'embout de votre oreille

1. Retirez votre aide auditive de l'arrière de votre oreille.
2. Tirez légèrement sur votre lobe pour aider à déloger votre embout auriculaire, puis tirez lentement sur l'embout de l'extérieur jusqu'à ce que l'embout soit retiré de votre conduit auditif.
3. Rangez l'appareil dans une boîte de rangement appropriée.

12 Entretien et nettoyage



1. Nettoyez immédiatement les embouts chaque fois que vous les utilisez avec un chiffon doux.
2. Utilisez des lingettes nettoyantes destinées au nettoyage des embouts auriculaires.
3. Utilisez les accessoires fournis par le fabricant de l'appareil auditif, si nécessaire.
4. En cas de colmatage du filtre (le cas échéant), rendez-vous dans votre centre auditif pour le remplacer.

13 Durée de vie

«Durée de vie» désigne le temps prévu de bon fonctionnement du dispositif médical, en préservant ses caractéristiques fonctionnelles pour lesquelles il a été conçu, sans présenter de risques potentiels pour l'opérateur et les patients.

La fin de vie de votre embout auriculaire se fera lorsqu'il aura subi une détérioration due au vieillissement, à des dommages ou à tout changement important qui affecte l'ajustement de l'embout ou la perte auditive.

Pour l'élimination du produit à la fin de sa durée de vie, veuillez consulter votre magasin professionnel.

La durée de vie d'un embout est de 1 an, avec une mention spéciale pour les embouts pour enfants où la recommandation de changer les embouts sera réduite à tous les 3 à 6 mois.

14 Guide de dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solution
L'aide auditive n'est pas assez forte	Embout auriculaire/ Tube couvert ou bloqué.	Retirez l'obstruction et nettoyez l'embout.
	Tube fissuré.	Remplacement du tube dans votre magasin de professionnels de l'audition.
	Mal couplé avec l'appareil auditif.	Recouplez l'embout avec l'aide auditive.
Son de sortie intermittent	Embout auriculaire/ Tube couvert ou bloqué.	Retirez l'obstruction et nettoyez l'embout.
Le moule ne s'adapte pas à l'oreille	Modification de la morphologie de l'oreille (croissance, prise de poids, etc.).	Rendez-vous chez votre audioprothésiste.

Informations du fabricant
MICROSON S.A.U.
téléphone de contact +34 93 300 58 00
NIF A08612079
Can Cuías, 69
08110 Montcada i Reixac. Spain