


Especificaciones Técnicas

m34 Digital ITC

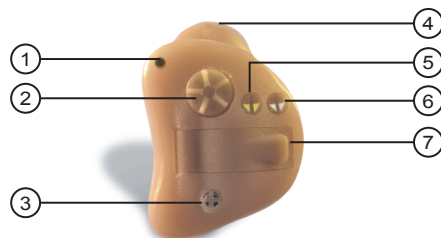

- ① Ventilación
- ② Control de Volumen
- ③ Micrófono
- ④ Filtro
- ⑤ Control de Tono (NH)
- ⑥ Nivel Máximo salida (PC)
- ⑦ Compartimento pila (Tipo 312)

DESCRIPCIÓN

Siguiendo la línea de la familia *m34 Digital*, *m34 Digital ITC* es un audífono digital de un canal, con estrategia de procesamiento WDRC.

Sus 2 controles digitales y su potente matrix, permiten al audioprotesista un ajuste preciso y de gran fiabilidad.

m34 Digital ITC está diseñado para pérdidas de moderadas a severas de tipo transmisivas y mixtas.

Datos Acústicos		IEC 118-7:1994	IEC 118-0:1993	IEC 118-7:2005
SALIDA	NPAS90 Máximo	118	128	119
	Frecuencia Máxima NPAS90	3100	3100	1600
	Frecuencia Ref. NPAS90 / PAF-NPAS90*	114	122	114*
GANANCIA	Ganancia Máxima (dB) @ RTF / Ganancia Máxima (dB) @ PAF*	41	50	38*
	Ganancia Máxima GM (dB)	47	57	46
	Frecuencia GM (Hz)	3000	3100	3000
	Ganancia Ensayo Referencia	41	49	38
RUIDO	Ruido de entrada equivalente (dB _{SPL})	27	26	32
CONTROL AUT. GANANCIA	Tiempo de respuesta (ms)	1	1	1
	Tiempo de caída (ms)	13	10	7
DISTORSIÓN	500 Hz @ 70 dB _{SPL} Ent. (%)	1,4	1,6	0,2
	800 Hz @ 70 dB _{SPL} Ent. (%)	2,8	1,4	0,3
	1600 Hz @ 70/65* dB _{SPL} Ent. (%)	1,0	1,1	0,4*
CONSUMO	Consumo (mA)	0,71	0,70	0,7
LÍMITE DE FRECUENCIA	Frecuencia límite bajo (Hz)	-	-	<200
	Frecuencia límite alto (Hz)	-	-	6200
*HFA = Average 1000 Hz, 1600 Hz y 2500 Hz RTF = 1600 Hz		2CC	ES	2CC

Características

- ✓ Matrix 118/47
- ✓ 100% Tecnología Digital
- ✓ 1 Canal
- ✓ 2 Controles (NH, PC)
- ✓ Tamaño reducido
- ✓ Totalmente compatible con la telefonía móvil*
- ✓ Pila tipo 312 - PR41 (EN 60086)

Requerimientos


- ✓ No necesita programador.

Códigos

Pedido: 73261 FP M34 Digital ITC R
GTIN-13: 8435281304387

Pedido: 73262 FP M34 Digital ITC L
GTIN-13: 8435281304394


Rango de Adaptación

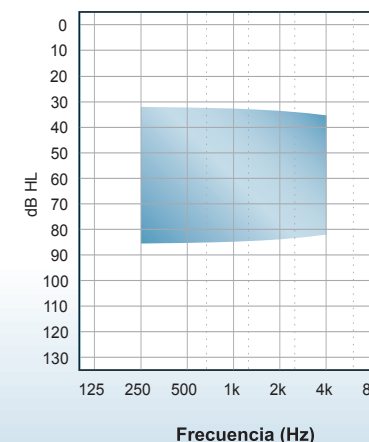


* Según Normativa IEC 60118-13

Especificaciones Técnicas


MÁXIMA GANANCIA @ OSPL @ IEC 118-7

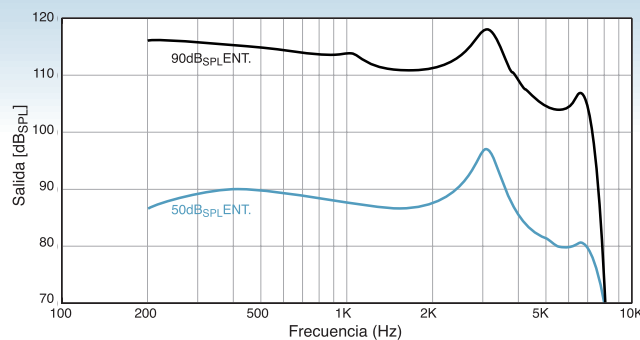


MÁXIMA GANANCIA @ OSPL @ IEC 118-0

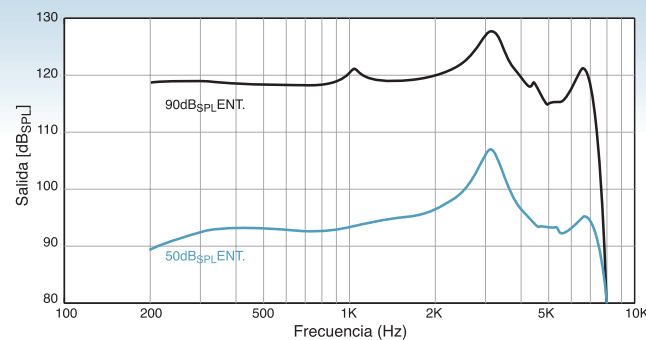


RESPUESTA EN FRECUENCIA VS CONTROL NH

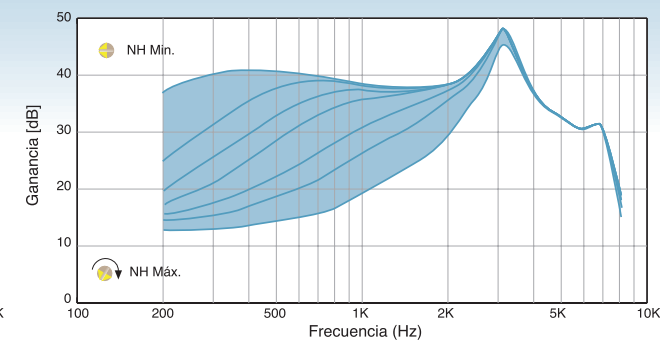


RESPUESTA EN FRECUENCIA @ IEC 118-7

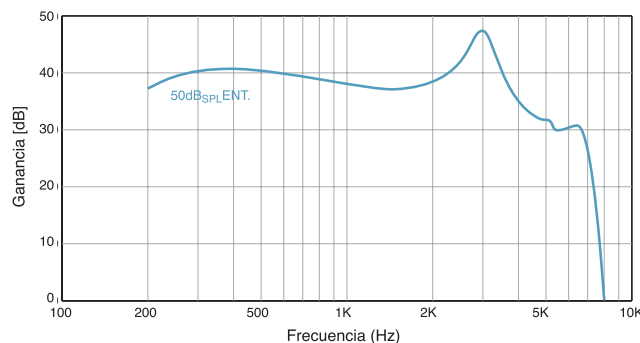


RESPUESTA EN FRECUENCIA @ IEC 118-0

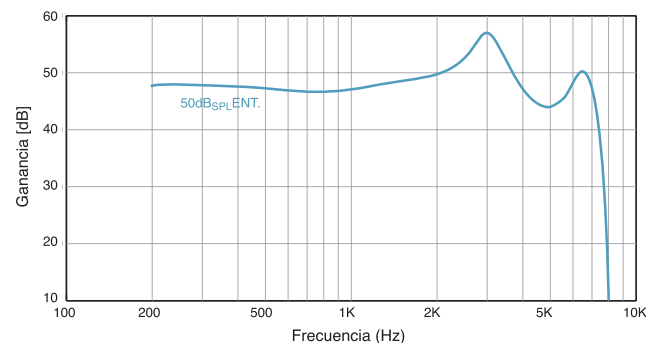


OSPL VS CONTROL PC

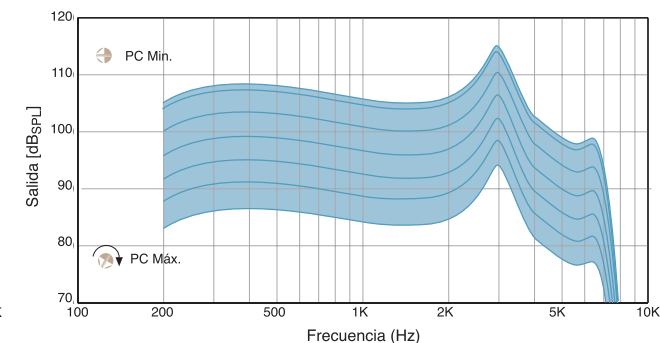

ENT. / SAL. @ GANANCIA REFERENCIA @ IEC 118-7

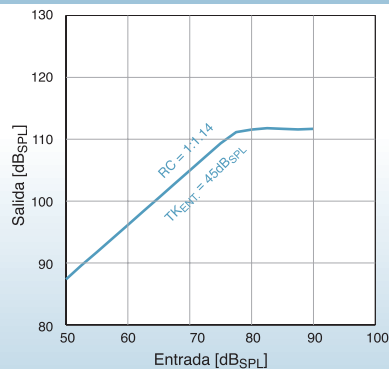

ENT. / SAL. @ GANANCIA REFERENCIA @ IEC 118-0

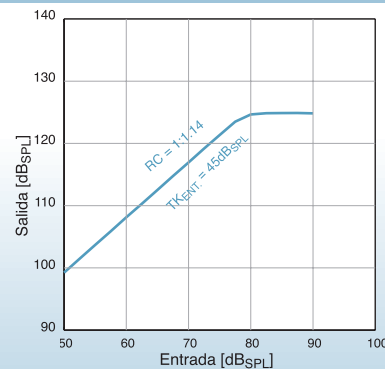

RESPUESTA EN FRECUENCIA VS CONTROL DE VOL.

